

用於生產樣品的濃縮、乾燥、精製、溶劑去除

標準配備 20L 樣品瓶、安裝面積為 1060W x 550Dmm 的省空間機種 (W型為700Dmm)。
真空控制功能和容易拆卸的樣品瓶燒瓶底座等，均為考慮到使用方便的設計。



N-4100

用戶

大學

有機・合成化學、藥學、化學工程、生物學等領域進行大量處理的部門


企業

醫藥品・食品・化妝品・農藥・農業・化學・石油化學等生產企業

規格


產品名稱	中大型減壓濃縮機	
樣品瓶	圓底燒瓶 20L (口徑100mm)	
轉速範圍	10~140rpm無級變速	
溫度調節範圍	室溫 +10~180°C (水・油兩用)	
溫度調節精度	± 1°C (水)・± 3°C (油)：樣品瓶旋轉時	
型號	N-4100	N-4100W
產品代碼NO.	281208	281218
台車	有	有
蒸發能力	Max.4.0L/h (水的蒸發量)	
到達真空度	2.7hPa (2Torr) 以下	4.6hPa (3.5Torr) 以下
收集瓶	圓底燒瓶 10L (帶排液旋塞)	圓底燒瓶 10L (帶排液旋塞) 2個
外部尺寸 (mm)	1060W x 550D x 1910H	1060W x 700D x 1910H
重量	約138kg	約149kg
電源	19~20A・3.8~4.4kVA・400~220v 單相50/60Hz AC200V 單相30A容量	

※性能是在室溫20°C、額定電源電壓時的數值。 ※不帶電源線。

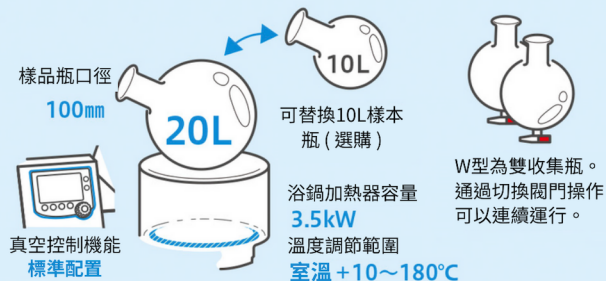

水・油兩用鍋的溫度調節範圍為室溫 +10~180°C，標準配備 20L 樣品瓶、10L 收集瓶 (W型為2個) 和真空控制器的中大型減壓濃縮機。

Point 01 | 提高了可視性・操作性

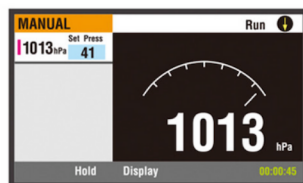

真空控制器畫面更換為4.3英寸，觀察相關數值更方便。

Point 02 | 標準配置安全蓋



配備安全蓋防止旋轉過程中夾住手或衣物。

系統組合案例

樣品注入・溶媒排出系統

N-4100型 + IDU-1000型 + CA-2610型 + N950 + 真空保冷管

